

獸醫診所的實用解決方案 輕鬆讀懂毛寶貝

myvet table X500

數位影像系統

with 17x17 inch Tethered DR Panel

- 強大的 32kW 發電機
- 17"x17" CsI 平板探測器
- 4 向浮動工作台，便於動物定位
- 直觀的用戶界面面板



快速、便利和動物專用的 X 射線系統

高功率最實用



32kW 高頻發生器通過 kVp 和 mAs 值 選擇最大 mA，以最佳曝光技術確保最低的曝光劑量。
具有雙焦點的旋轉陽極 X 射線管，可提供出色的圖像質量，以進行自信的診斷。

移動桌提供，使用坪效

堅固的管架直接安裝在裝有發生器的桌子上，可為任何臨床環境提供最節省空間的解決方案。
彈簧鎖可以安靜地釋放四向浮動桌面，幫助安撫放在桌子上的動物。

全機進口非拼裝機

X500 具有較小的工作空間和預留的 17 x 17 英寸碘化鉍平板探測器，為獸醫從業人員提供了一個緊湊而強大的數字 X 射線系統，可滿足其所有成像需求。

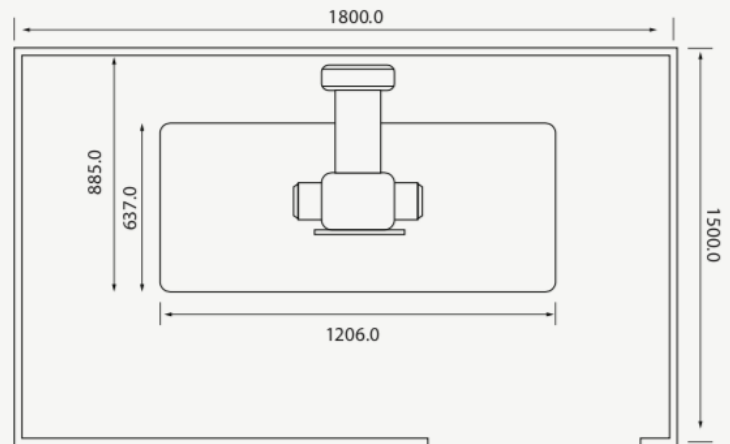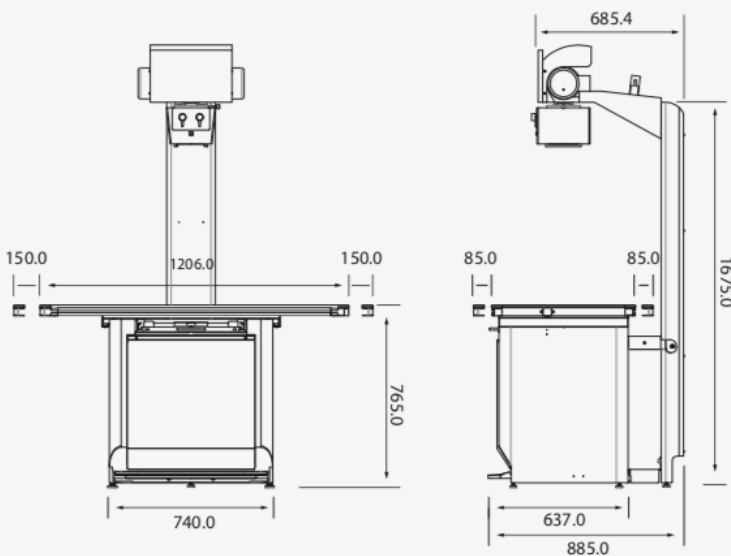

Generator

Max Output	32kW
kV Range	40-125kV
mA Range	10-400mA
mAs Range	0.1-630mAs
Exposure timer Range	0.004 to 10sec
APR	216
Max Anode Heat Capacity	140 KHU
Filament Frequency Limits	0-25 kHz

Flat Panel Detector

Sensor Type	Amorphous Silicon with TFT
Detection Area	17 x 17 in
Scintillator	Cesium-Iodide(CsI)
Pixel Pitch	140µm

* Specifications subject to change without prior notice *